


クリーンスクリュー管



液体用ガラス樹脂容器
錠剤・粉末用ガラス樹脂容器
チューブ
バイアル瓶
小型～大型汎用瓶
スボイド瓶 スプレー瓶
アロマトンク容器 スボイド対応容器
クリーム容器
計量容器類
ピペット
収納ホルダー
部品類
特性表

1 液体用ガラス樹脂容器

スクリー管	P 16
TS・FS スクリー管	P 17
FC スクリー管	P 20
CC スクリー管	P 22
短寸 スクリー管	P 24
広口 スクリー管	P 25
マイティ バイアル	P 26
スクリー カップ	P 28
メディア バイアル	P 29
クリーン スクリー管	P 30
シリコン コーティングV	P 31
ローソク瓶	P 32
アルコール ランプ	P 33
セントバイアル	P 34
PPセント バイアル	P 35
PPバイアル瓶	P 36
EMPPバイアル	P 38
PFA容器	P 39
ピンバイアル	P 40
ノズルバイアル	P 41
EMロック ボトル	P 42
EMライト ボトル	P 44
PETローション ボトル	P 46
KNTボトル	P 48
デュエット ボトル	P 49
マイティ パック	P 50
マルエムパック	P 51
メールボトル	P 52

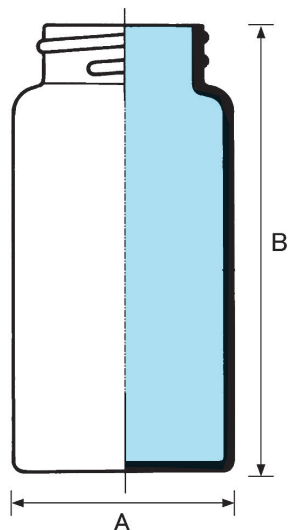

クリーンスクリュー管(珪酸ガラス 日本電気硝子製) 受注生産品

	コード	型番	容量 (mL)	A (mm)	B (mm)	受注最低ロット (ケース入数)	本体単価
透明	0106-02	CS-01W	3.5	15.0	40	4,496 (2,248本×2ケース)	¥ 74
	0106-03	CS-1W	4.0	16.5	40	3,672 (1,836本×2ケース)	¥ 74
	0106-04	CS-2W	6.0	18.0	40	3,600 (1,800本×2ケース)	¥ 78
	0106-05	CS-3W	9.0	21.0	45	2,436 (812本×3ケース)	¥ 102
	0106-06	CS-3LW	10.0	21.0	50	2,436 (812本×3ケース)	¥ 112
	0106-07	CS-4W	13.5	24.0	50	1,848 (616本×3ケース)	¥ 124
	0106-08	CS-5W	20.0	27.0	55	1,560 (520本×3ケース)	¥ 146
	0106-09	CS-6W	30.0	30.0	65	1,392 (464本×3ケース)	¥ 170
	0106-10	CS-7W	50.0	35.0	78	768 (256本×3ケース)	¥ 254
	0106-11	CS-7LW	60.0	40.0	75	780 (390本×2ケース)	¥ 304
	0106-12	CS-8W	110.0	40.0	120	520 (260本×2ケース)	¥ 358
褐色	0106-22	CS-01A	3.5	15.0	40	4,496 (2,248本×2ケース)	¥ 76
	0106-23	CS-1A	4.0	16.5	40	3,672 (1,836本×2ケース)	¥ 76
	0106-24	CS-2A	6.0	18.0	40	3,600 (1,800本×2ケース)	¥ 80
	0106-25	CS-3A	9.0	21.0	45	2,436 (812本×3ケース)	¥ 106
	0106-26	CS-3LA	10.0	21.0	50	2,436 (812本×3ケース)	¥ 116
	0106-27	CS-4A	13.5	24.0	50	1,848 (616本×3ケース)	¥ 126
	0106-28	CS-5A	20.0	27.0	55	1,560 (520本×3ケース)	¥ 150
	0106-29	CS-6A	30.0	30.0	65	1,392 (464本×3ケース)	¥ 178
	0106-30	CS-7A	50.0	35.0	78	768 (256本×3ケース)	¥ 256
	0106-31	CS-7LA	60.0	40.0	75	780 (390本×2ケース)	¥ 324
	0106-32	CS-8A	110.0	40.0	120	520 (260本×2ケース)	¥ 370

※ご注文は受注最低ロット、かつケース単位でお願いします。

※納期につきましてはお問い合わせ下さい。

※対応スクリーキャップはP.18・P.19をご参照下さい。

洗浄加工の目的

付着異物の除去



- 容器製造時の環境に由来する浮遊粉塵が多く付着しています。
- 容器は一般的には段ボールに収納されており端部から発生する紙粉や紙片が付着・混入しています。

反応生成異物の除去




- ソーダ石灰ガラスでは保管条件によりブルーム(空気中の炭酸ガスと容器のNaイオンが反応し容器内面が白くなる現象)がみられることがあります。
- ブルームはエアー洗浄では除去できません。

キズ等の除去 キズ・カケ・割れ、練り込み異物



- 容器の欠陥は製品品質に大きく影響します。
- 事前の排除により検査工程数の削減に寄与します。


シリコンコーティングバイアル

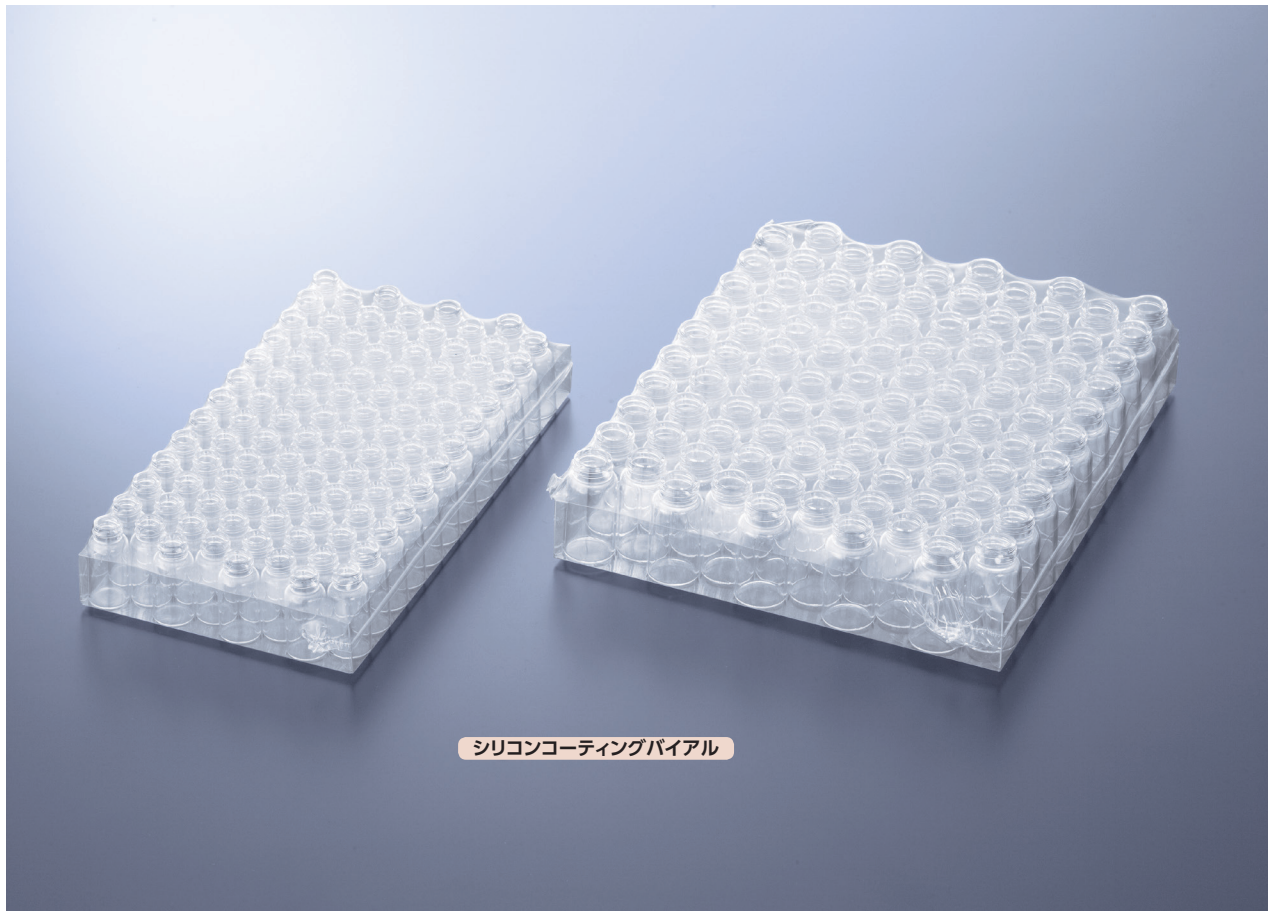

シリコンコーティングバイアル

シリコンコーティングバイアル(硼珪酸ガラス 日本電気硝子製)

受注
生産品

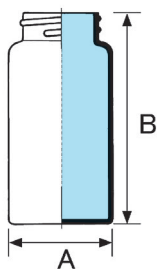

コード	型番	容量 (mℓ)	A (mm)	B (mm)	受注最低ロット (ケース入数)	本体単価
0112-51	S-No.2-MS	6	18	40	2,400 (1,200本×2ケース)	¥ 100
0112-52	S-No.3-MS	9	21	45	1,600 (800本×2ケース)	¥ 120
0112-53	S-No.5-MS	20	27	55	1,040 (520本×2ケース)	¥ 170
0112-54	S-No.6-MS	30	30	65	928 (464本×2ケース)	¥ 200

※ご注文は受注最低ロット、かつケース単位でお願いします。
※納期につきましてはお問い合わせ下さい。
※同サイズの褐色も対応が可能です。お問い合わせ下さい。
※対応スクリーキャップはP.18・P.19をご参照下さい。

シリコン加工の目的・特長

目的

- 撥水性、破損防止、商品価値の向上、製剤の安定性。

特長

- 内容液・製剤が直接ガラスに触れない為、ガラス成分溶出による沈殿、変色等の経時変化を抑えたり、ガラス表面への吸着を抑えることが出来ます。
- 凍結乾燥剤で使用される場合、シリコンの離型性により凍結時間が短縮され、結晶が錠剤形にきれいに仕上がります。凍結時の破損を防ぎ、不良率を少なくすることが出来ます。
- 撥水性が高い為、最後の一滴まで無駄なく使用することができます。

液体用ガラス 樹脂容器
錠剤・粉末用ガラス 樹脂容器
チューブ
バイアル瓶
小型～大型 汎用瓶
スボイド瓶 スプレー瓶
アロマ向け容器 スボイド対応容器
クリーム容器
計量容器類
ピペット
収納ホルダー
部品類
特性表

1 液体用ガラス 樹脂容器

スクリー管	P. 16
TS-FS スクリー管	P. 17
FC スクリー管	P. 20
CC スクリー管	P. 22
短寸 スクリー管	P. 24
広口 スクリー管	P. 25
マイティー バイアル	P. 26
スクリー カップ	P. 28
メディア バイアル	P. 29
クリーン スクリー管	P. 30
シリコン コーティングV	P. 31
ローソク瓶	P. 32
アルコール ランプ	P. 33
セントバイアル	P. 34
PPセント バイアル	P. 35
PPバイアル瓶	P. 36
エムPPバイアル	P. 38
PFA容器	P. 39
ピンバイアル	P. 40
ノズルバイアル	P. 41
エムロック ボトル	P. 42
エムライト ボトル	P. 44
PETローション ボトル	P. 46
KNTボトル	P. 48
デュエット ボトル	P. 49
マイティー パック	P. 50
マルエムパック	P. 51
メールボトル	P. 52